

Natrelle®

SHAPE THAT HOLDS
SATISFACTION THAT LASTS

ナトレル® シリーズ 製品カタログ

ゲル充填人工乳房

ナトレル® ^{フォーテン} 410 ブレスト・インプラント

ゲル充填人工乳房

ナトレル® ブレスト・インプラント

皮膚拡張器

ナトレル® 133 ティッシュ・エクスパンダー

ゲル充填人工乳房

ナトレル® ^{フォーテン} 410 ブレスト・インプラントの付属品 サイザー

ゲル充填人工乳房

ナトレル[®] 410

フォーテン

ブレスト・インプラント

ゲル充填人工乳房

ナトレル[®]

ブレスト・インプラント

Choice

ナトレル[®] シリーズは日本で唯一の製造販売承認品です。

形状はアナトミカルとラウンドの2種類

表面構造は凸凹加工のあるテクスチャードタイプと滑らかなスムーズタイプの2種類

中身のコヒーシブゲルは硬さの異なる3種類

アナトミカル型

テクスチャードのみ



ゲル充填人工乳房

ナトレル[®] 410 ブレスト・インプラント

ラウンド型

テクスチャード



ゲル充填人工乳房

ナトレル[®] ブレスト・インプラント


スムーズ(受注生産品)*



豊富なバリエーション

横幅、高さ、プロジェクション、
充填材の組み合わせで346種類
患者さんの状態や
希望に合わせて選択可能

アナトミカル型

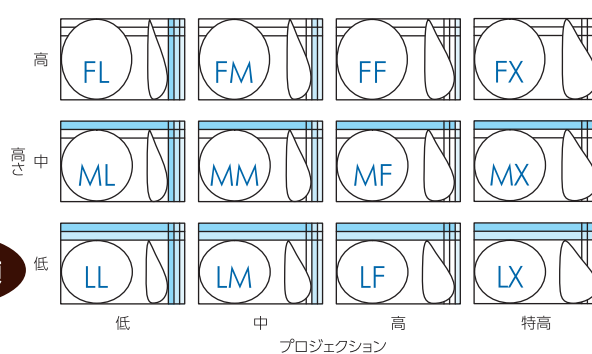

204種類

ラウンド型

スタイル 110 115 120
テクスチャード



スタイル110
うすめ



スタイル115
少しあつめ



スタイル120
あつめ

142種類

スタイル 10 15 20 40 45
スムーズ(受注生産品)*



スタイル10*
うすめ



スタイル15*
少しあつめ



スタイル20*
あつめ



スタイル40*
少しあつめ



スタイル45*
かなりあつめ

※詳細は別カタログをご参照ください

Technology



Quality

シェル損傷の場合でもゲルの拡散を抑制する TruForm[®] ゲル(コヒーシブゲル)の高い凝集性

コヒーシブ(Cohesive)とは?…粘着性／凝集性の意

当社のブレスト・インプラントに充填されているゲルは、すべてコヒーシブゲルです

ゲルの凝集性を高め、シェルからの漏出および破損時の体内への放出・拡散を防ぐ事を意図しています

また、凝集性の異なる3種類のゲル(TruForm[®])により、乳房再建において、形状だけではなく乳房の「柔らかさの違い」が新たな選択肢として加わります




形態安定性あり




高い安全性

- ・組織との結合を高め、被膜内でのインプラントの移動抑制を目的としたテクスチャードタイプの表面構造¹⁻⁶

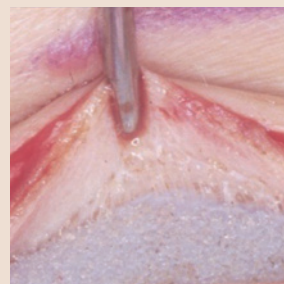
直径 600-800 μm 深さ 150-200 μm 

組織接着

- ・ゲルの漏出を物理化学的に抑制するシェル Intrashiel[™] バリア層構造^{1, 3, 7-10}

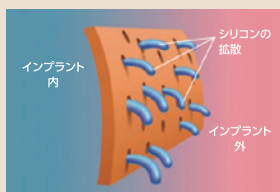

旧製品

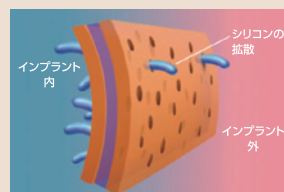

Intrashielバリア層構造

- ・アラガンは乳房インプラント領域のパイオニアとして40年以上の実績を有し、毎年850,000個のインプラント、ティッシュ・エキスパンダーを全世界へお届けしています。¹¹⁻¹³
1993年の発売開始以来、600,000個以上のナトレル[®] 410を販売しています。¹⁴

皮膚拡張器


ナトレル® 133 ティッシュ・エキスパンダー

日本で唯一の乳房専用皮膚拡張器

- ・自然な乳房下方のポケットを作ることができるアナトミカル型
- ・組織との結合性を高め、被膜内でのエキスパンダーの移動抑制を目的としたテクスチャードタイプの表面構造
- ・乳房上縁部の拡張に合わせてしずく形状、半月形状、クロワッサン形状の3タイプから選択可能



しずく形状

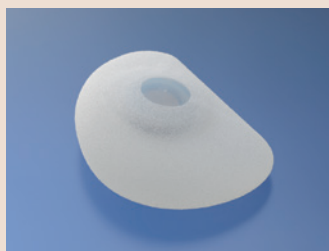

半月形状



クロワッサン形状

ナトレル®133 ティッシュ・エキスパンダーの高さとプロジェクションによる分類

42種類



一体型生理食塩液注入口

- ・感染症のリスクを低減する目的で、本体と一体になった生理食塩液注入口を採用



生理食塩液注入口は透明なパッチ部と異なります



生理食塩液注入口は透明なパッチ部と同じ面です



生理食塩液注入口は透明なパッチ部と同じ面です

ナトレル® 133 ティッシュ・エクスパンダー

ナトレル® 133 ティッシュ・エクスパンダーは
ナトレル® 410 ブレスト・インプラントの形状に対応しています

スタイル対応表

ナトレル® 133 ティッシュ・エクスパンダー			ナトレル® 410 プレスト・インプラント			ナトレル® 133 ティッシュ・エクスパンダー			ナトレル® 410 プレスト・インプラント		
形状	プロジェクション 低・中・高		低	中	高	形状	特高		特高		
高	FV	FV - 6 サイズ	FL	FM	FF	FX	FX - 6 サイズ		FX		
中	MV	MV - 6 サイズ	ML	MM	MF	MX	MX - 6 サイズ		MX		
低	SV LV	SV/LV - 6 サイズ	LL	LM	LF	SX	SX - 6 サイズ		LX		

ナトレル® 410 ブレスト・インプラントの付属品 サイザー TruForm® 2

ナトレル® ブレスト・インプラントの付属品 サイザー TruForm® 1 (受注生産品)*

※詳細は別カタログをご参照ください

挿入しやすいスムーズタイプ表面

- ・インプラントのサイズを決めるために手術時に一時的に挿入します

参考文献

1. Bengtson BP, et al. Style 410 highly cohesive silicone breast implant core study results at 3 years. *Plast Reconstr Surg* 2007;120(1):40-48S.
2. Maxwell GP, et al. Natrelle Style 410 form-stable silicone breast implants: core study results at 6 years. *Aesthet Surg J* 2012;32(6):709-17.
3. Maxwell GP, Gabriel A. The evolution of breast implants. *Clin Plast Surg* 2009;36:1-13.
4. Danino AM, et al. Comparison of the capsular response to the Biocell RTV and Mentor 1600 Siltex breast implant surface texturing: a scanning electron microscopic study. *Plast Reconstr Surg* 2001;108:2047-52.
5. Brown MH, et al. Cohesive silicone gel breast implants in aesthetic and reconstructive breast surgery. *Plast Reconstr Surg* 2005;116(3):768-79.
6. Abramo AC, et al. How texture-inducing contraction vectors affect the fibrous capsule shrinkage around breasts implants. *Aesth Plast Surg* 2010;34(5):555-60.
7. Hedén P, et al. Long-term safety and effectiveness of style 410 highly cohesive silicone breast implants. *Aesth Plast Surg* 2009; 33:430-6.
8. Hedén P, et al. Style 410 cohesive silicone breast implants: safety and effectiveness at 5 to 9 years after implantation. *Plast Reconstr Surg* 2006;118(6):1281-7.
9. Spear SL, Hedén P. Allergan's silicone gel breast implants. *Expert Rev Med Devices* 2007;4:699-708.
10. Spear SL, et al. Inamed silicone breast implant core study results at 6 years. *Plast Reconstr Surg* 2007;120(7):8-16.
11. Medical Insight Inc. The Global Aesthetic Market Study: Acceleration in Some Segments Offset by Slowdown in Others. January 2013.
12. Data on file. Allergan, Inc. (Number of implants delivered worldwide).
13. Data on file. Allergan, Inc. Bondurant Safety of Silicone Gel Breast Implants (40 year heritage).
14. Data on file. Allergan, Inc. (US Natrelle Style 410 SSSED).

Natrelle®

SHAPE THAT HOLDS
SATISFACTION THAT LASTS

ゲル充填人工乳房

フォーテン
ナトレル® 410
ブレスト・インプラント

TruForm® 1
ナトレル®
ブレスト・インプラント
(ラウンド型)

TruForm® 2
ナトレル® 410
ブレスト・インプラント
(アナトミカル型)

TruForm® 3
ナトレル® 410
ブレスト・インプラント
(アナトミカル型)

柔らかめ


硬め

ナトレル® 410 ブレスト・インプラント

テクスチャードタイプ TruForm® 3




FL スタイル FL

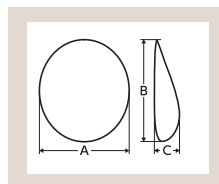


容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
140	10.0	10.5	2.9	JTF3-FL100-140
190	11.0	11.5	3.1	JTF3-FL110-190
220	11.5	12.0	3.2	JTF3-FL115-220
250	12.0	12.5	3.4	JTF3-FL120-250
285	12.5	13.0	3.6	JTF3-FL125-285
320	13.0	13.5	3.8	JTF3-FL130-320

FM スタイル FM

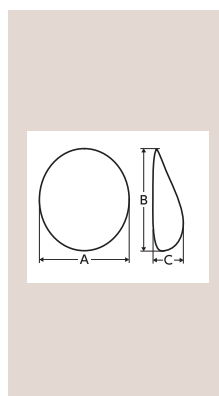


容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
155	9.5	10.0	3.4	JTF3-FM095-155
180	10.0	10.5	3.6	JTF3-FM100-180
205	10.5	11.0	3.8	JTF3-FM105-205
235	11.0	11.5	4.0	JTF3-FM110-235
270	11.5	12.0	4.2	JTF3-FM115-270
310	12.0	12.5	4.4	JTF3-FM120-310
350	12.5	13.0	4.6	JTF3-FM125-350
395	13.0	13.5	4.8	JTF3-FM130-395
440	13.5	14.0	5.0	JTF3-FM135-440
500	14.0	14.5	5.2	JTF3-FM140-500
550	14.5	15.0	5.4	JTF3-FM145-550
605	15.0	15.5	5.5	JTF3-FM150-605
670	15.5	16.0	5.6	JTF3-FM155-670

FF スタイル FF

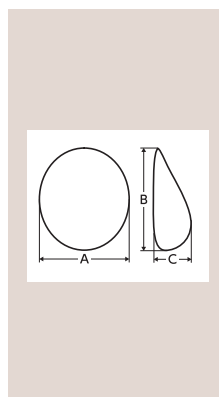

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
160	9.5	10.0	3.7	JTF3-FF095-160
185	10.0	10.5	4.0	JTF3-FF100-185
220	10.5	11.0	4.2	JTF3-FF105-220
255	11.0	11.5	4.4	JTF3-FF110-255
290	11.5	12.0	4.6	JTF3-FF115-290
335	12.0	12.5	4.8	JTF3-FF120-335
375	12.5	13.0	5.1	JTF3-FF125-375
425	13.0	13.5	5.2	JTF3-FF130-425
475	13.5	14.0	5.3	JTF3-FF135-475
535	14.0	14.5	5.6	JTF3-FF140-535
595	14.5	15.0	5.8	JTF3-FF145-595
655	15.0	15.5	6.1	JTF3-FF150-655
740	15.5	16.0	6.2	JTF3-FF155-740

FX スタイル FX

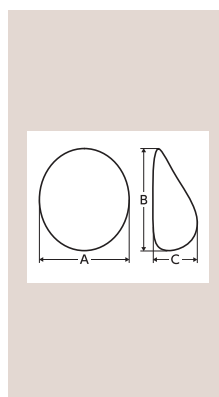

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
185	9.5	10.0	4.6	JTF3-FX095-185
215	10.0	10.5	4.9	JTF3-FX100-215
245	10.5	11.0	5.1	JTF3-FX105-245
280	11.0	11.5	5.3	JTF3-FX110-280
315	11.5	12.0	5.5	JTF3-FX115-315
360	12.0	12.5	5.7	JTF3-FX120-360
410	12.5	13.0	6.0	JTF3-FX125-410
450	13.0	13.5	6.1	JTF3-FX130-450
495	13.5	14.0	6.2	JTF3-FX135-495
560	14.0	14.5	6.5	JTF3-FX140-560
615	14.5	15.0	6.7	JTF3-FX145-615
690	15.0	15.5	7.0	JTF3-FX150-690
775	15.5	16.0	7.1	JTF3-FX155-775

ナトレル® 410 ブレスト・インプラント


テクスチャードタイプ

TruForm® 2



FL


スタイル FL

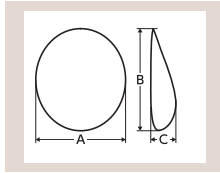

容量 (cc)	幅 (A)(cm)	高さ (B)(cm)	プロジェクション (C)(cm)	カタログNo.
140	10.0	10.5	2.9	JTF2-FL100-140
190	11.0	11.5	3.1	JTF2-FL110-190
220	11.5	12.0	3.2	JTF2-FL115-220
250	12.0	12.5	3.4	JTF2-FL120-250
320	13.0	13.5	3.8	JTF2-FL130-320

FM


スタイル FM

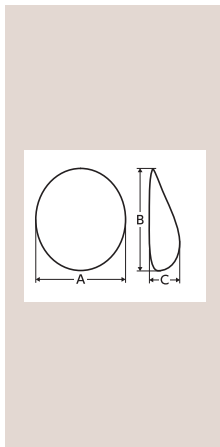


容量 (cc)	幅 (A)(cm)	高さ (B)(cm)	プロジェクション (C)(cm)	カタログNo.
155	9.5	10.0	3.4	JTF2-FM095-155
180	10.0	10.5	3.6	JTF2-FM100-180
205	10.5	11.0	3.8	JTF2-FM105-205
235	11.0	11.5	4.0	JTF2-FM110-235
270	11.5	12.0	4.2	JTF2-FM115-270
310	12.0	12.5	4.4	JTF2-FM120-310
350	12.5	13.0	4.6	JTF2-FM125-350
395	13.0	13.5	4.8	JTF2-FM130-395
440	13.5	14.0	5.0	JTF2-FM135-440
500	14.0	14.5	5.2	JTF2-FM140-500
550	14.5	15.0	5.4	JTF2-FM145-550
605	15.0	15.5	5.5	JTF2-FM150-605
670	15.5	16.0	5.6	JTF2-FM155-670

FF

スタイル FF

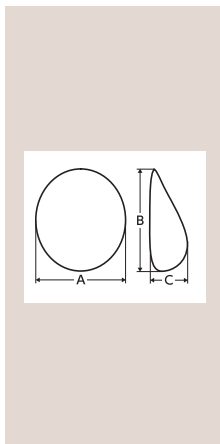

容量 (cc)	幅 (A)(cm)	高さ (B)(cm)	プロジェクション (C)(cm)	カタログNo.
160	9.5	10.0	3.7	JTF2-FF095-160
185	10.0	10.5	4.0	JTF2-FF100-185
220	10.5	11.0	4.2	JTF2-FF105-220
255	11.0	11.5	4.4	JTF2-FF110-255
290	11.5	12.0	4.6	JTF2-FF115-290
335	12.0	12.5	4.8	JTF2-FF120-335
375	12.5	13.0	5.1	JTF2-FF125-375
425	13.0	13.5	5.2	JTF2-FF130-425
475	13.5	14.0	5.3	JTF2-FF135-475
535	14.0	14.5	5.6	JTF2-FF140-535
595	14.5	15.0	5.8	JTF2-FF145-595
655	15.0	15.5	6.1	JTF2-FF150-655
740	15.5	16.0	6.2	JTF2-FF155-740

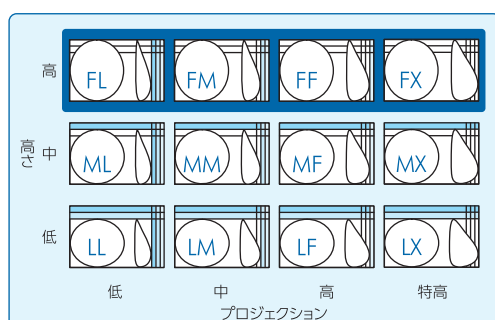

ナトレル® 410 フォーテン ブレスト・インプラント

テクスチャードタイプ TruForm® 3



ML スタイル ML

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
125	10.0	9.1	2.9	JTF3-ML100-125
170	11.0	10.1	3.1	JTF3-ML110-170
195	11.5	10.6	3.2	JTF3-ML115-195
220	12.0	11.1	3.4	JTF3-ML120-220
285	13.0	12.1	3.8	JTF3-ML130-285

MM スタイル MM

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
135	9.5	8.6	3.4	JTF3-MM095-135
160	10.0	9.1	3.6	JTF3-MM100-160
185	10.5	9.6	3.8	JTF3-MM105-185
215	11.0	10.1	4.0	JTF3-MM110-215
245	11.5	10.6	4.2	JTF3-MM115-245
280	12.0	11.1	4.4	JTF3-MM120-280
320	12.5	11.6	4.6	JTF3-MM125-320
360	13.0	12.1	4.8	JTF3-MM130-360
400	13.5	12.5	5.0	JTF3-MM135-400
450	14.0	12.9	5.2	JTF3-MM140-450

MF スタイル MF

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
140	9.5	8.6	3.7	JTF3-MF095-140
165	10.0	9.1	4.0	JTF3-MF100-165
195	10.5	9.6	4.2	JTF3-MF105-195
225	11.0	10.1	4.4	JTF3-MF110-225
255	11.5	10.6	4.6	JTF3-MF115-255
295	12.0	11.1	4.8	JTF3-MF120-295
335	12.5	11.6	5.1	JTF3-MF125-335
375	13.0	12.1	5.2	JTF3-MF130-375
420	13.5	12.5	5.3	JTF3-MF135-420
470	14.0	12.9	5.6	JTF3-MF140-470
525	14.5	13.2	5.8	JTF3-MF145-525
580	15.0	13.6	6.1	JTF3-MF150-580
640	15.5	13.9	6.2	JTF3-MF155-640

MX スタイル MX

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
165	9.5	8.6	4.6	JTF3-MX095-165
195	10.0	9.1	4.9	JTF3-MX100-195
225	10.5	9.6	5.1	JTF3-MX105-225
255	11.0	10.1	5.3	JTF3-MX110-255
290	11.5	10.6	5.5	JTF3-MX115-290
325	12.0	11.1	5.7	JTF3-MX120-325
370	12.5	11.6	6.0	JTF3-MX125-370
410	13.0	12.1	6.1	JTF3-MX130-410
445	13.5	12.5	6.2	JTF3-MX135-445
520	14.0	12.9	6.5	JTF3-MX140-520
550	14.5	13.2	6.7	JTF3-MX145-550
620	15.0	13.6	7.0	JTF3-MX150-620
685	15.5	13.9	7.1	JTF3-MX155-685


ナトレル[®] 410 フォーテン ブレスト・インプラント

テクスチャードタイプ

TruForm[®] 2

ML


スタイル ML

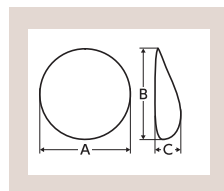

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
125	10.0	9.1	2.9	JTF2-ML100-125
170	11.0	10.1	3.1	JTF2-ML110-170
195	11.5	10.6	3.2	JTF2-ML115-195
220	12.0	11.1	3.4	JTF2-ML120-220
285	13.0	12.1	3.8	JTF2-ML130-285

MM


スタイル MM

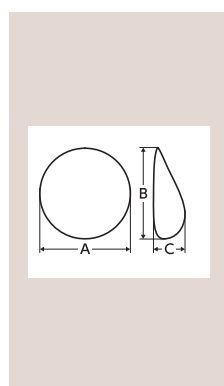


容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
135	9.5	8.6	3.4	JTF2-MM095-135
160	10.0	9.1	3.6	JTF2-MM100-160
185	10.5	9.6	3.8	JTF2-MM105-185
215	11.0	10.1	4.0	JTF2-MM110-215
245	11.5	10.6	4.2	JTF2-MM115-245
280	12.0	11.1	4.4	JTF2-MM120-280
320	12.5	11.6	4.6	JTF2-MM125-320
360	13.0	12.1	4.8	JTF2-MM130-360
400	13.5	12.5	5.0	JTF2-MM135-400
450	14.0	12.9	5.2	JTF2-MM140-450

MF


スタイル MF

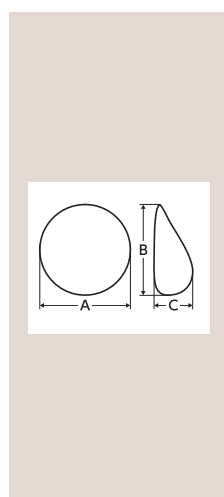

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
140	9.5	8.6	3.7	JTF2-MF095-140
165	10.0	9.1	4.0	JTF2-MF100-165
195	10.5	9.6	4.2	JTF2-MF105-195
225	11.0	10.1	4.4	JTF2-MF110-225
255	11.5	10.6	4.6	JTF2-MF115-255
295	12.0	11.1	4.8	JTF2-MF120-295
335	12.5	11.6	5.1	JTF2-MF125-335
375	13.0	12.1	5.2	JTF2-MF130-375
420	13.5	12.5	5.3	JTF2-MF135-420
470	14.0	12.9	5.6	JTF2-MF140-470
525	14.5	13.2	5.8	JTF2-MF145-525
580	15.0	13.6	6.1	JTF2-MF150-580
640	15.5	13.9	6.2	JTF2-MF155-640

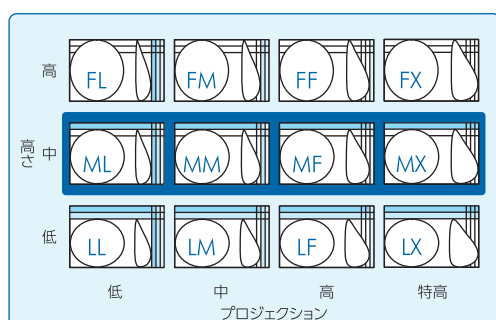


LL スタイル LL

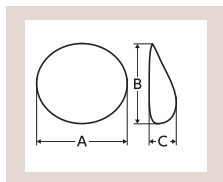


容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
135	10.5	8.6	3.0	JTF3-LL105-135
180	11.5	9.6	3.2	JTF3-LL115-180
210	12.0	10.1	3.4	JTF3-LL120-210
240	12.5	10.5	3.6	JTF3-LL125-240
300	13.5	11.4	4.0	JTF3-LL135-300

LM スタイル LM

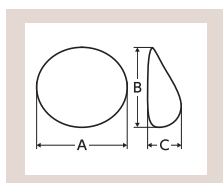


容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
140	10.0	8.1	3.6	JTF3-LM100-140
190	11.0	9.1	4.0	JTF3-LM110-190
220	11.5	9.6	4.2	JTF3-LM115-220
250	12.0	10.1	4.4	JTF3-LM120-250
320	13.0	10.9	4.8	JTF3-LM130-320

LF スタイル LF

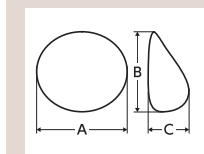

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
125	9.5	7.6	3.7	JTF3-LF095-125
150	10.0	8.1	4.0	JTF3-LF100-150
175	10.5	8.6	4.2	JTF3-LF105-175
205	11.0	9.1	4.4	JTF3-LF110-205
240	11.5	9.6	4.6	JTF3-LF115-240
270	12.0	10.1	4.8	JTF3-LF120-270
310	12.5	10.5	5.1	JTF3-LF125-310
350	13.0	10.9	5.2	JTF3-LF130-350
390	13.5	11.4	5.3	JTF3-LF135-390
440	14.0	11.8	5.6	JTF3-LF140-440
490	14.5	12.2	5.8	JTF3-LF145-490
540	15.0	12.6	6.1	JTF3-LF150-540
595	15.5	13.0	6.2	JTF3-LF155-595

LX スタイル LX

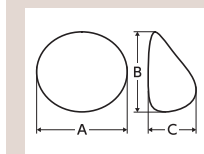

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
145	9.5	7.6	4.6	JTF3-LX095-145
175	10.0	8.1	4.9	JTF3-LX100-175
195	10.5	8.6	5.1	JTF3-LX105-195
225	11.0	9.1	5.3	JTF3-LX110-225
255	11.5	9.6	5.5	JTF3-LX115-255
290	12.0	10.1	5.7	JTF3-LX120-290
330	12.5	10.5	6.0	JTF3-LX125-330
365	13.0	10.9	6.1	JTF3-LX130-365
405	13.5	11.4	6.2	JTF3-LX135-405
455	14.0	11.8	6.5	JTF3-LX140-455
515	14.5	12.2	6.7	JTF3-LX145-515
570	15.0	12.6	7.0	JTF3-LX150-570
625	15.5	13.0	7.1	JTF3-LX155-625

ナトレル[®] 410 フォーテン ブレスト・インプラント

テクスチャードタイプ


TruForm[®] 2TruForm[®] 1ナトレル[®]
プレスト・インプラント
(ラウンド型)TruForm[®] 2ナトレル[®] 410
プレスト・インプラント
(アナトミカル型)TruForm[®] 3ナトレル[®] 410
プレスト・インプラント
(アナトミカル型)

柔らかめ

硬め

LL


スタイル LL

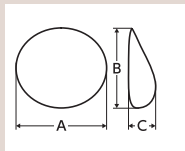

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
135	10.5	8.6	3.0	JTF2-LL105-135
180	11.5	9.6	3.2	JTF2-LL115-180
210	12.0	10.1	3.4	JTF2-LL120-210
240	12.5	10.5	3.6	JTF2-LL125-240
300	13.5	11.4	4.0	JTF2-LL135-300

LM


スタイル LM

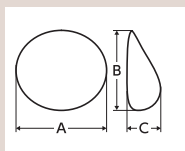


容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
140	10.0	8.1	3.6	JTF2-LM100-140
190	11.0	9.1	4.0	JTF2-LM110-190
220	11.5	9.6	4.2	JTF2-LM115-220
250	12.0	10.1	4.4	JTF2-LM120-250
320	13.0	10.9	4.8	JTF2-LM130-320

LF

スタイル LF

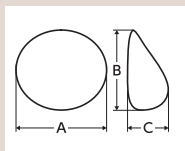

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
125	9.5	7.6	3.7	JTF2-LF095-125
150	10.0	8.1	4.0	JTF2-LF100-150
175	10.5	8.6	4.2	JTF2-LF105-175
205	11.0	9.1	4.4	JTF2-LF110-205
240	11.5	9.6	4.6	JTF2-LF115-240
270	12.0	10.1	4.8	JTF2-LF120-270
310	12.5	10.5	5.1	JTF2-LF125-310
350	13.0	10.9	5.2	JTF2-LF130-350
390	13.5	11.4	5.3	JTF2-LF135-390
440	14.0	11.8	5.6	JTF2-LF140-440
490	14.5	12.2	5.8	JTF2-LF145-490
540	15.0	12.6	6.1	JTF2-LF150-540
595	15.5	13.0	6.2	JTF2-LF155-595

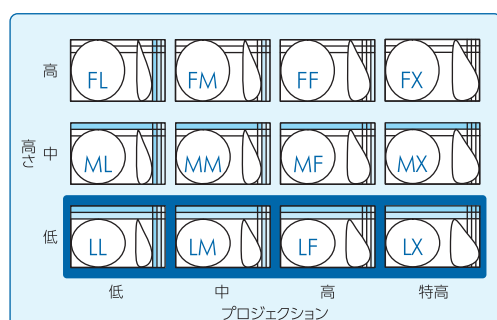

Natrelle®

SHAPE THAT HOLDS
SATISFACTION THAT LASTS


ゲル充填人工乳房

ナトレル® ブレスト・インプラント






110 スタイル 110

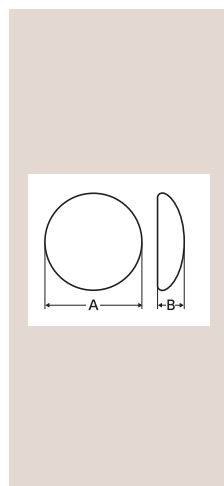


容量 (cc)	幅 (A)(cm)	プロジェクション (B)(cm)	カタログNo.
90	8.7	2.0	J110-090
120	9.0	2.4	J110-120
150	9.7	2.5	J110-150
180	10.3	2.7	J110-180
210	11.1	2.8	J110-210
240	11.7	2.9	J110-240
270	12.3	3.0	J110-270
300	12.6	3.1	J110-300
330	12.8	3.1	J110-330
360	13.5	3.2	J110-360
390	13.7	3.2	J110-390
420	13.9	3.3	J110-420
450	14.3	3.3	J110-450
480	15.1	3.3	J110-480
510	15.5	3.4	J110-510

115 スタイル 115

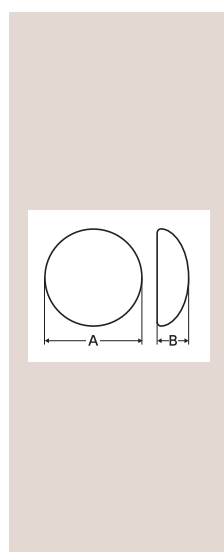

容量 (cc)	幅 (A)(cm)	プロジェクション (B)(cm)	カタログNo.
150	9.7	3.1	J115-150
167	10.0	3.2	J115-167
185	10.4	3.3	J115-185
203	10.7	3.3	J115-203
222	11.0	3.5	J115-222
253	11.6	3.6	J115-253
272	11.8	3.7	J115-272
290	12.0	3.8	J115-290
322	12.5	3.9	J115-322
354	13.0	4.0	J115-354
378	13.2	4.1	J115-378
401	13.4	4.2	J115-401
435	13.8	4.3	J115-435
469	14.1	4.4	J115-469
507	14.5	4.5	J115-507
547	14.9	4.5	J115-547
586	15.3	4.6	J115-586

120 スタイル 120

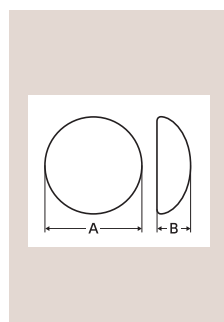

容量 (cc)	幅 (A)(cm)	プロジェクション (B)(cm)	カタログNo.
180	9.4	3.3	J120-180
220	9.9	3.7	J120-220
260	10.6	4.0	J120-260
300	11.0	4.2	J120-300
340	11.5	4.3	J120-340
400	12.1	4.5	J120-400
440	12.7	4.6	J120-440
500	13.5	4.7	J120-500
600	14.5	4.9	J120-600
650	15.5	5.0	J120-650


Natrelle®

SHAPE THAT HOLDS
SATISFACTION THAT LASTS

皮膚拡張器

ナトレル® 133


ティッシュ・エキスパンダー

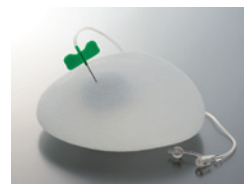

ナトレル®133 ティッシュ・エキスパンダーの高さとプロジェクションによる分類




FV スタイル 133FV

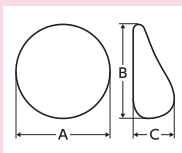


推奨注入容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
300	11.0	11.5	5.0	J133FV-11
400	12.0	12.5	5.3	J133FV-12
500	13.0	13.5	5.7	J133FV-13
600	14.0	14.5	6.2	J133FV-14
750	15.0	15.5	6.7	J133FV-15
850	16.0	16.5	6.8	J133FV-16

MV | スタイル 133MV

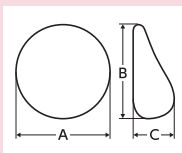

推奨注入容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
250	11.0	10.0	4.9	J133MV-11
300	12.0	11.0	5.2	J133MV-12
400	13.0	12.0	5.6	J133MV-13
500	14.0	13.0	6.0	J133MV-14
600	15.0	14.0	6.3	J133MV-15
700	16.0	15.0	6.6	J133MV-16

SV スタイル 133SV

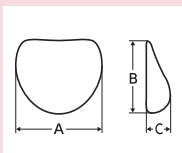


推奨注入容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
200	11.0	7.6	4.7	J133SV-11
250	12.0	8.4	5.3	J133SV-12
300	13.0	9.1	5.7	J133SV-13
375	14.0	9.7	6.0	J133SV-14
450	15.0	10.5	6.3	J133SV-15
550	16.0	11.3	6.3	J133SV-16

ティッシュ・エキスパンダーには、体外から生理食塩液注入部を確認するためのマグナ・ファインダーが同梱されています。




LV スタイル 133LV

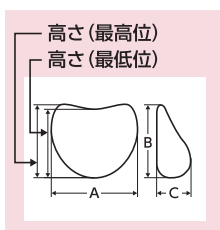


推奨注入容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)		プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
		最低位	最高位		
150	11.0	7.0	7.6	4.7	J133LV-11
200	12.0	7.5	8.4	5.3	J133LV-12
300	13.0	8.0	9.1	5.7	J133LV-13
350	14.0	8.5	9.7	6.0	J133LV-14
400	15.0	9.0	10.5	6.3	J133LV-15
500	16.0	9.5	11.3	6.3	J133LV-16

FX スタイル 133FX

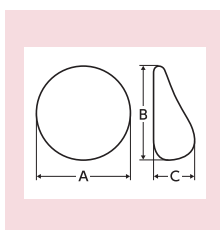


推奨注入容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
350	11.0	11.5	5.9	J133FX-11
450	12.0	12.5	6.3	J133FX-12
550	13.0	13.5	6.7	J133FX-13
650	14.0	14.5	7.1	J133FX-14
800	15.0	15.5	7.6	J133FX-15
950	15.5	16.0	8.1	J133FX-16

MX スタイル 133MX

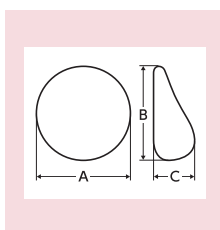

推奨注入容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
300	11.0	10.0	5.9	J133MX-11
400	12.0	11.0	6.3	J133MX-12
500	13.0	12.0	6.7	J133MX-13
600	14.0	13.0	7.1	J133MX-14
700	15.0	14.0	7.6	J133MX-15
850	15.5	14.5	8.1	J133MX-16

SX スタイル 133SX

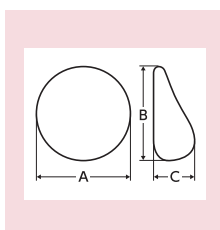

推奨注入容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
250	11.0	9.0	5.9	J133SX-11
350	12.0	10.0	6.3	J133SX-12
400	13.0	11.0	6.7	J133SX-13
500	14.0	12.0	7.1	J133SX-14
650	15.0	13.0	7.6	J133SX-15
800	15.5	13.5	8.1	J133SX-16

Natrelle®

SHAPE THAT HOLDS
SATISFACTION THAT LASTS

ゲル充填人工乳房

ナトレル® 410

フォーテン


ブレスト・インプラントの付属品 サイザー

ナトレル[®] 410 フォーテン ブレスト・インプラントの付属品 サイザー

スムーズタイプ[®] TruForm[®] 2

SZFM


スタイル SZFM

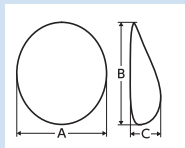

容量 (cc)	幅 (A)(cm)	高さ (B)(cm)	プロジェクション (C)(cm)	カタログNo.
155	9.5	10.0	3.4	J-SZFM155
180	10.0	10.5	3.6	J-SZFM180
205	10.5	11.0	3.8	J-SZFM205
235	11.0	11.5	4.0	J-SZFM235
270	11.5	12.0	4.2	J-SZFM270
310	12.0	12.5	4.4	J-SZFM310
350	12.5	13.0	4.6	J-SZFM350
395	13.0	13.5	4.8	J-SZFM395
440	13.5	14.0	5.0	J-SZFM440
500	14.0	14.5	5.2	J-SZFM500
550	14.5	15.0	5.4	J-SZFM550
605	15.0	15.5	5.5	J-SZFM605
670	15.5	16.0	5.6	J-SZFM670

SZFF


スタイル SZFF

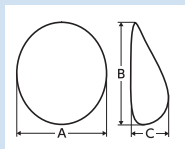

容量 (cc)	幅 (A)(cm)	高さ (B)(cm)	プロジェクション (C)(cm)	カタログNo.
160	9.5	10.0	3.7	J-SZFF160
185	10.0	10.5	4.0	J-SZFF185
220	10.5	11.0	4.2	J-SZFF220
255	11.0	11.5	4.4	J-SZFF255
290	11.5	12.0	4.6	J-SZFF290
335	12.0	12.5	4.8	J-SZFF335
375	12.5	13.0	5.1	J-SZFF375
425	13.0	13.5	5.2	J-SZFF425
475	13.5	14.0	5.3	J-SZFF475
535	14.0	14.5	5.6	J-SZFF535
595	14.5	15.0	5.8	J-SZFF595
655	15.0	15.5	6.1	J-SZFF655
740	15.5	16.0	6.2	J-SZFF740

SZFX

スタイル SZFX

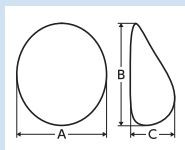


容量 (cc)	幅 (A)(cm)	高さ (B)(cm)	プロジェクション (C)(cm)	カタログNo.
185	9.5	10.0	4.6	J-SZFX185
215	10.0	10.5	4.9	J-SZFX215
245	10.5	11.0	5.1	J-SZFX245
280	11.0	11.5	5.3	J-SZFX280
315	11.5	12.0	5.5	J-SZFX315
360	12.0	12.5	5.7	J-SZFX360
410	12.5	13.0	6.0	J-SZFX410
450	13.0	13.5	6.1	J-SZFX450
495	13.5	14.0	6.2	J-SZFX495
560	14.0	14.5	6.5	J-SZFX560
615	14.5	15.0	6.7	J-SZFX615
690	15.0	15.5	7.0	J-SZFX690
775	15.5	16.0	7.1	J-SZFX775

ナトレル[®] 410 フォーテン ブレスト・インプラントの付属品 サイザー


スムーズタイプ[®] TruForm[®] 2

SZMM スタイル SZMM

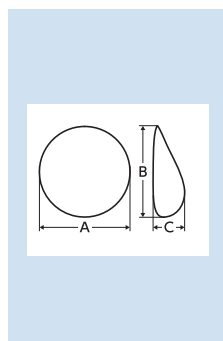


容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
160	10.0	9.1	3.6	J-SZMM160
185	10.5	9.6	3.8	J-SZMM185
215	11.0	10.1	4.0	J-SZMM215
245	11.5	10.6	4.2	J-SZMM245
280	12.0	11.1	4.4	J-SZMM280
320	12.5	11.6	4.6	J-SZMM320
360	13.0	12.1	4.8	J-SZMM360
400	13.5	12.5	5.0	J-SZMM400
450	14.0	12.9	5.2	J-SZMM450

SZMF スタイル SZMF

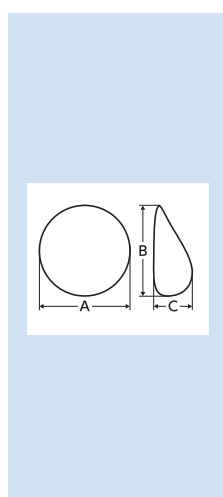

容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
140	9.5	8.6	3.7	J-SZMF140
165	10.0	9.1	4.0	J-SZMF165
195	10.5	9.6	4.2	J-SZMF195
225	11.0	10.1	4.4	J-SZMF225
255	11.5	10.6	4.6	J-SZMF255
295	12.0	11.1	4.8	J-SZMF295
335	12.5	11.6	5.1	J-SZMF335
375	13.0	12.1	5.2	J-SZMF375
420	13.5	12.5	5.3	J-SZMF420
470	14.0	12.9	5.6	J-SZMF470
525	14.5	13.2	5.8	J-SZMF525
580	15.0	13.6	6.1	J-SZMF580
640	15.5	13.9	6.2	J-SZMF640

SZMX スタイル SZMX

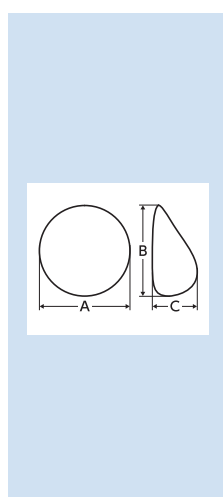


容量(cc)	幅(A)(cm)	高さ(B)(cm)	プロジェクション(C)(cm)	カタログNo.
165	9.5	8.6	4.6	J-SZMX165
195	10.0	9.1	4.9	J-SZMX195
225	10.5	9.6	5.1	J-SZMX225
255	11.0	10.1	5.3	J-SZMX255
290	11.5	10.6	5.5	J-SZMX290
325	12.0	11.1	5.7	J-SZMX325
370	12.5	11.6	6.0	J-SZMX370
410	13.0	12.1	6.1	J-SZMX410
445	13.5	12.5	6.2	J-SZMX445
520	14.0	12.9	6.5	J-SZMX520
550	14.5	13.2	6.7	J-SZMX550
620	15.0	13.6	7.0	J-SZMX620
685	15.5	13.9	7.1	J-SZMX685

ナトレル[®] 410 フォーテン ブレスト・インプラントの付属品 サイザー

スムーズタイプ[®] TruForm[®] 2

SZLF

スタイル SZLF

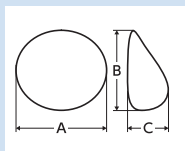

容量 (cc)	幅 (A)(cm)	高さ (B)(cm)	プロジェクション (C)(cm)	カタログNo.
125	9.5	7.6	3.7	J-SZLF125
150	10.0	8.1	4.0	J-SZLF150
175	10.5	8.6	4.2	J-SZLF175
205	11.0	9.1	4.4	J-SZLF205
240	11.5	9.6	4.6	J-SZLF240
270	12.0	10.1	4.8	J-SZLF270
310	12.5	10.5	5.1	J-SZLF310
390	13.5	11.4	5.3	J-SZLF390
440	14.0	11.8	5.6	J-SZLF440
490	14.5	12.2	5.8	J-SZLF490
540	15.0	12.6	6.1	J-SZLF540
595	15.5	13.0	6.2	J-SZLF595

ナトレル[®] フォーテン 410 ブレスト・インプラント

スタイル FL

	容量 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	プロジェ クション (cm)	カタログ番号		
					TruForm [®] 2	TruForm [®] 3	サイザー
FL-140	140	10.0	10.5	2.9	JTF2-FL100-140	JTF3-FL100-140	—
FL-190	190	11.0	11.5	3.1	JTF2-FL110-190	JTF3-FL110-190	—
FL-220	220	11.5	12.0	3.2	JTF2-FL115-220	JTF3-FL115-220	—
FL-250	250	12.0	12.5	3.4	JTF2-FL120-250	JTF3-FL120-250	—
FL-285	285	12.5	13.0	3.6	—	JTF3-FL125-285	—
FL-320	320	13.0	13.5	3.8	JTF2-FL130-320	JTF3-FL130-320	—

スタイル FM

	容量 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	プロジェ クション (cm)	カタログ番号		
					TruForm [®] 2	TruForm [®] 3	サイザー
FM-155	155	9.5	10.0	3.4	JTF2-FM095-155	JTF3-FM095-155	J-SZFM155
FM-180	180	10.0	10.5	3.6	JTF2-FM100-180	JTF3-FM100-180	J-SZFM180
FM-205	205	10.5	11.0	3.8	JTF2-FM105-205	JTF3-FM105-205	J-SZFM205
FM-235	235	11.0	11.5	4.0	JTF2-FM110-235	JTF3-FM110-235	J-SZFM235
FM-270	270	11.5	12.0	4.2	JTF2-FM115-270	JTF3-FM115-270	J-SZFM270
FM-310	310	12.0	12.5	4.4	JTF2-FM120-310	JTF3-FM120-310	J-SZFM310
FM-350	350	12.5	13.0	4.6	JTF2-FM125-350	JTF3-FM125-350	J-SZFM350
FM-395	395	13.0	13.5	4.8	JTF2-FM130-395	JTF3-FM130-395	J-SZFM395
FM-440	440	13.5	14.0	5.0	JTF2-FM135-440	JTF3-FM135-440	J-SZFM440
FM-500	500	14.0	14.5	5.2	JTF2-FM140-500	JTF3-FM140-500	J-SZFM500
FM-550	550	14.5	15.0	5.4	JTF2-FM145-550	JTF3-FM145-550	J-SZFM550
FM-605	605	15.0	15.5	5.5	JTF2-FM150-605	JTF3-FM150-605	J-SZFM605
FM-670	670	15.5	16.0	5.6	JTF2-FM155-670	JTF3-FM155-670	J-SZFM670

スタイル ML

	容量 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	プロジェ クション (cm)	カタログ番号		
					TruForm [®] 2	TruForm [®] 3	サイザー
ML-125	125	10.0	9.1	2.9	JTF2-ML100-125	JTF3-ML100-125	—
ML-170	170	11.0	10.1	3.1	JTF2-ML110-170	JTF3-ML110-170	—
ML-195	195	11.5	10.6	3.2	JTF2-ML115-195	JTF3-ML115-195	—
ML-220	220	12.0	11.1	3.4	JTF2-ML120-220	JTF3-ML120-220	—
ML-285	285	13.0	12.1	3.8	JTF2-ML130-285	JTF3-ML130-285	—

スタイル MM

	容量 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	プロジェ クション (cm)	カタログ番号		
					TruForm [®] 2	TruForm [®] 3	サイザー
MM-135	135	9.5	8.6	3.4	JTF2-MM095-135	JTF3-MM095-135	—
MM-160	160	10.0	9.1	3.6	JTF2-MM100-160	JTF3-MM100-160	J-SZMM160
MM-185	185	10.5	9.6	3.8	JTF2-MM105-185	JTF3-MM105-185	J-SZMM185
MM-215	215	11.0	10.1	4.0	JTF2-MM110-215	JTF3-MM110-215	J-SZMM215
MM-245	245	11.5	10.6	4.2	JTF2-MM115-245	JTF3-MM115-245	J-SZMM245
MM-280	280	12.0	11.1	4.4	JTF2-MM120-280	JTF3-MM120-280	J-SZMM280
MM-320	320	12.5	11.6	4.6	JTF2-MM125-320	JTF3-MM125-320	J-SZMM320
MM-360	360	13.0	12.1	4.8	JTF2-MM130-360	JTF3-MM130-360	J-SZMM360
MM-400	400	13.5	12.5	5.0	JTF2-MM135-400	JTF3-MM135-400	J-SZMM400
MM-450	450	14.0	12.9	5.2	JTF2-MM140-450	JTF3-MM140-450	J-SZMM450

スタイル LL

	容量 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	プロジェ クション (cm)	カタログ番号		
					TruForm [®] 2	TruForm [®] 3	サイザー
LL-135	135	10.5	8.6	3.0	JTF2-LL105-135	JTF3-LL105-135	—
LL-180	180	11.5	9.6	3.2	JTF2-LL115-180	JTF3-LL115-180	—
LL-210	210	12.0	10.1	3.4	JTF2-LL120-210	JTF3-LL120-210	—
LL-240	240	12.5	10.5	3.6	JTF2-LL125-240	JTF3-LL125-240	—
LL-300	300	13.5	11.4	4.0	JTF2-LL135-300	JTF3-LL135-300	—

スタイル LM

	容量 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	プロジェ クション (cm)	カタログ番号		
					TruForm [®] 2	TruForm [®] 3	サイザー
LM-140	140	10.0	8.1	3.6	JTF2-LM100-140	JTF3-LM100-140	—
LM-190	190	11.0	9.1	4.0	JTF2-LM110-190	JTF3-LM110-190	—
LM-220	220	11.5	9.6	4.2	JTF2-LM115-220	JTF3-LM115-220	—
LM-250	250	12.0	10.1	4.4	JTF2-LM120-250	JTF3-LM120-250	—
LM-320	320	13.0	10.9	4.8	JTF2-LM130-320	JTF3-LM130-320	—



&サイザー サイズ早見表&対応表

スタイル FF

	容量 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	プロジェクト ジョイント (cm)	カタログ番号		
					TruForm® 2	TruForm® 3	サイザー
FF-160	160	9.5	10.0	3.7	JTF2-FF095-160	JTF3-FF095-160	J-SZFF160
FF-185	185	10.0	10.5	4.0	JTF2-FF100-185	JTF3-FF100-185	J-SZFF185
FF-220	220	10.5	11.0	4.2	JTF2-FF105-220	JTF3-FF105-220	J-SZFF220
FF-255	255	11.0	11.5	4.4	JTF2-FF110-255	JTF3-FF110-255	J-SZFF255
FF-290	290	11.5	12.0	4.6	JTF2-FF115-290	JTF3-FF115-290	J-SZFF290
FF-335	335	12.0	12.5	4.8	JTF2-FF120-335	JTF3-FF120-335	J-SZFF335
FF-375	375	12.5	13.0	5.1	JTF2-FF125-375	JTF3-FF125-375	J-SZFF375
FF-425	425	13.0	13.5	5.2	JTF2-FF130-425	JTF3-FF130-425	J-SZFF425
FF-475	475	13.5	14.0	5.3	JTF2-FF135-475	JTF3-FF135-475	J-SZFF475
FF-535	535	14.0	14.5	5.6	JTF2-FF140-535	JTF3-FF140-535	J-SZFF535
FF-595	595	14.5	15.0	5.8	JTF2-FF145-595	JTF3-FF145-595	J-SZFF595
FF-655	655	15.0	15.5	6.1	JTF2-FF150-655	JTF3-FF150-655	J-SZFF655
FF-740	740	15.5	16.0	6.2	JTF2-FF155-740	JTF3-FF155-740	J-SZFF740

スタイル MF

	容量 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	プロジェクト ジョイント (cm)	カタログ番号		
					TruForm® 2	TruForm® 3	サイザー
MF-140	140	9.5	8.6	3.7	JTF2-MF095-140	JTF3-MF095-140	J-SZMF140
MF-165	165	10.0	9.1	4.0	JTF2-MF100-165	JTF3-MF100-165	J-SZMF165
MF-195	195	10.5	9.6	4.2	JTF2-MF105-195	JTF3-MF105-195	J-SZMF195
MF-225	225	11.0	10.1	4.4	JTF2-MF110-225	JTF3-MF110-225	J-SZMF225
MF-255	255	11.5	10.6	4.6	JTF2-MF115-255	JTF3-MF115-255	J-SZMF255
MF-295	295	12.0	11.1	4.8	JTF2-MF120-295	JTF3-MF120-295	J-SZMF295
MF-335	335	12.5	11.6	5.1	JTF2-MF125-335	JTF3-MF125-335	J-SZMF335
MF-375	375	13.0	12.1	5.2	JTF2-MF130-375	JTF3-MF130-375	J-SZMF375
MF-420	420	13.5	12.5	5.3	JTF2-MF135-420	JTF3-MF135-420	J-SZMF420
MF-470	470	14.0	12.9	5.6	JTF2-MF140-470	JTF3-MF140-470	J-SZMF470
MF-525	525	14.5	13.2	5.8	JTF2-MF145-525	JTF3-MF145-525	J-SZMF525
MF-580	580	15.0	13.6	6.1	JTF2-MF150-580	JTF3-MF150-580	J-SZMF580
MF-640	640	15.5	13.9	6.2	JTF2-MF155-640	JTF3-MF155-640	J-SZMF640

スタイル LF

	容量 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	プロジェクト ジョイント (cm)	カタログ番号		
					TruForm® 2	TruForm® 3	サイザー
LF-125	125	9.5	7.6	3.7	JTF2-LF095-125	JTF3-LF095-125	J-SZLF125
LF-150	150	10.0	8.1	4.0	JTF2-LF100-150	JTF3-LF100-150	J-SZLF150
LF-175	175	10.5	8.6	4.2	JTF2-LF105-175	JTF3-LF105-175	J-SZLF175
LF-205	205	11.0	9.1	4.4	JTF2-LF110-205	JTF3-LF110-205	J-SZLF205
LF-240	240	11.5	9.6	4.6	JTF2-LF115-240	JTF3-LF115-240	J-SZLF240
LF-270	270	12.0	10.1	4.8	JTF2-LF120-270	JTF3-LF120-270	J-SZLF270
LF-310	310	12.5	10.5	5.1	JTF2-LF125-310	JTF3-LF125-310	J-SZLF310
LF-350	350	13.0	10.9	5.2	JTF2-LF130-350	JTF3-LF130-350	—
LF-390	390	13.5	11.4	5.3	JTF2-LF135-390	JTF3-LF135-390	J-SZLF390
LF-440	440	14.0	11.8	5.6	JTF2-LF140-440	JTF3-LF140-440	J-SZLF440
LF-490	490	14.5	12.2	5.8	JTF2-LF145-490	JTF3-LF145-490	J-SZLF490
LF-540	540	15.0	12.6	6.1	JTF2-LF150-540	JTF3-LF150-540	J-SZLF540
LF-595	595	15.5	13.0	6.2	JTF2-LF155-595	JTF3-LF155-595	J-SZLF595

スタイル FX

	容量 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	プロジェクト ジョイント (cm)	カタログ番号	
					TruForm® 3	サイザー
FX-185	185	9.5	10.0	4.6	JTF3-FX095-185	J-SZFX185
FX-215	215	10.0	10.5	4.9	JTF3-FX100-215	J-SZFX215
FX-245	245	10.5	11.0	5.1	JTF3-FX105-245	J-SZFX245
FX-280	280	11.0	11.5	5.3	JTF3-FX110-280	J-SZFX280
FX-315	315	11.5	12.0	5.5	JTF3-FX115-315	J-SZFX315
FX-360	360	12.0	12.5	5.7	JTF3-FX120-360	J-SZFX360
FX-410	410	12.5	13.0	6.0	JTF3-FX125-410	J-SZFX410
FX-450	450	13.0	13.5	6.1	JTF3-FX130-450	J-SZFX450
FX-495	495	13.5	14.0	6.2	JTF3-FX135-495	J-SZFX495
FX-560	560	14.0	14.5	6.5	JTF3-FX140-560	J-SZFX560
FX-615	615	14.5	15.0	6.7	JTF3-FX145-615	J-SZFX615
FX-690	690	15.0	15.5	7.0	JTF3-FX150-690	J-SZFX690
FX-775	775	15.5	16.0	7.1	JTF3-FX155-775	J-SZFX775

スタイル MX

	容量 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	プロジェクト ジョイント (cm)	カタログ番号	
					TruForm® 3	サイザー
MX-165	165	9.5	8.6	4.6	JTF3-MX095-165	J-SZMX165
MX-195	195	10.0	9.1	4.9	JTF3-MX100-195	J-SZMX195
MX-225	225	10.5	9.6	5.1	JTF3-MX105-225	J-SZMX225
MX-255	255	11.0	10.1	5.3	JTF3-MX110-255	J-SZMX255
MX-290	290	11.5	10.6	5.5	JTF3-MX115-290	J-SZMX290
MX-325	325	12.0	11.1	5.7	JTF3-MX120-325	J-SZMX325
MX-370	370	12.5	11.6	6.0	JTF3-MX125-370	J-SZMX370
MX-410	410	13.0	12.1	6.1	JTF3-MX130-410	J-SZMX410
MX-445	445	13.5	12.5	6.2	JTF3-MX135-445	J-SZMX445
MX-520	520	14.0	12.9	6.5	JTF3-MX140-520	J-SZMX520
MX-550	550	14.5	13.2	6.7	JTF3-MX145-550	J-SZMX550
MX-620	620	15.0	13.6	7.0	JTF3-MX150-620	J-SZMX620
MX-685	685	15.5	13.9	7.1	JTF3-MX155-685	J-SZMX685

スタイル LX

	容量 (cc)	幅 (cm)	高さ (cm)	プロジェクト ジョイント (cm)	カタログ番号	
					TruForm® 3	サイザー
LX-145	145	9.5	7.6	4.6	JTF3-LX095-145	—
LX-175	175	10.0	8.1	4.9	JTF3-LX100-175	—
LX-195	195	10.5	8.6	5.1	JTF3-LX105-195	—
LX-225	225	11.0	9.1	5.3	JTF3-LX110-225	—
LX-255	255	11.5	9.6	5.5	JTF3-LX115-255	—
LX-290	290	12.0	10.1	5.7	JTF3-LX120-290	—
LX-330	330	12.5	10.5	6.0	JTF3-LX125-330	—
LX-365	365	13.0	10.9	6.1	JTF3-LX130-365	—
LX-405	405	13.5	11.4	6.2	JTF3-LX135-405	—
LX-455	455	14.0	11.8	6.5	JTF3-LX140-455	—
LX-515	515	14.5	12.2	6.7	JTF3-LX145-515	—
LX-570	570	15.0	12.6	7.0	JTF3-LX150-570	—
LX-625	625	15.5	13.0	7.1	JTF3-LX155-625	—

ナトレル® シリーズ

ナトレル® ^{フォーテン} 410 ブレスト・インプラント



ナトレル® ブレスト・インプラント



ナトレル® 133 ティッシュ・エクスパンダー



- ① 外箱
- ② 添付文書
- ③ アウタートレイ
- ④ インナートレイ (アウタートレイのなかに入っています)
- ⑤ 医療機器識別シール
- ⑥ 患者カード
- ⑦ ナトレル® 410 ブレスト・インプラント (本体)
- ⑧ ナトレル® ブレスト・インプラント (本体)
- ⑨ ナトレル® 133 ティッシュ・エクスパンダー (本体)
- ⑩ マグナ・ファインダー
- ⑪ (生食) 注入量記録用紙

販売名：ナトレル 410 プレスト・インプラント
医療機器承認番号：22500BZX00460000

販売名：ナトレル プレスト・インプラント
医療機器承認番号：22400BZX00354000

販売名：ナトレル 133 ティッシュ・エクスパンダー
医療機器承認番号：22400BZX00356000



製造販売元

アラガン・ジャパン株式会社

〒150-6035 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー35階

TEL：0120-404-100（9：00～18：00／土日祝日及び当社休業日を除く）

FAX：0120-407-100（24時間受付）

<http://www.allergan.jp/>

発行年月 2015年1月
JAP/0109/2014b